

## OMEZENÁ ZÁRUKA

Nabíjecí stojan má záruku 1 rok. Záruka se nevztahuje na poškození, za které se považují i opravy provedené jinou osobou než oprávněným pracovníkem společnosti Theragun. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití, běžné opotřebení, nedostatečnou údržbu a nehody způsobené pádem a podobně. Podrobné informace o záruce najdete na [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). V případě záležitostí týkajících se záruky nás kontaktujte e-mailem na [info@rehasport.cz](mailto:info@rehasport.cz).



## POUŽITÍ

### Nabíjení Theragun PRO nebo Theragun Elite:

1. Připojte napájecí adaptér do portu bezdrátového nabíjecího stojanu.
2. Vypněte přístroj.
3. Položte přístroj levou stranou na plochu bezdrátového nabíjecího stojanu. Plocha nabíječky je vytvarovaná pro položení přístroje.
4. Po správném připojení se rozsvítí LED kontrolka nabíjecího stojanu.
5. Přístroj je plně nabitý, když je ikona baterie na OLED displeji zařízení plná.
6. Theragun PRO/Elite může zůstat na bezdrátovém nabíjecím stojanu i po úplném nabití přístroje.

### Nabíjení Wave Rolleru:

1. Připojte napájecí adaptér do portu bezdrátového nabíjecího stojanu.
2. Vypněte přístroj.
3. Položte přístroj na plochu bezdrátového nabíjecího stojanu. Strana s ovládacími tlačítky by měla směřovat nahoru.
4. Po správném připojení se rozsvítí LED kontrolka nabíjecího stojanu.
5. Wave Roller je plně nabitý, když kontrolka baterie svítí nepřerušovaně zeleně.
6. Wave Roller může zůstat na bezdrátovém nabíjecím stojanu i po úplném nabití.

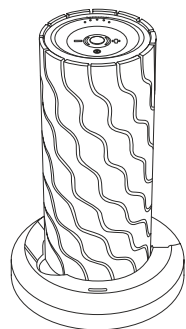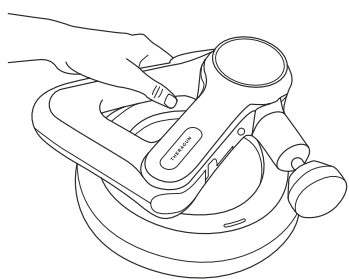

Nabíjecí stojan neumožňuje nabíjení více přístrojů současně.

# THERAGUN

## Bezdrátová multi-přístrojová nabíječka

### NÁVOD NA POUŽITÍ



Výrobce: Theragun, LLC, USA

Bezdrátová nabíječka pro přístroje Theragun PRO, Theragun Elite a Wave Roller

Kód produktu: MD-CHRGR-PKG-EU

Balení obsahuje:

Bezdrátová multi-přístrojová nabíječka, síťový adaptér

### ULOŽTE SI TYTO POKYNY PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

Pro více informací o Theragunu navštivte: [www.rehasport.cz/theragun](http://www.rehasport.cz/theragun).

Pro více informací o praktickém využití si stáhněte [Therabody App](#) na App Store či Google Play nebo shlédněte video návody na <https://www.rehasport.cz/videonavody-theragun/>.

Pokud pro Vás tyto informace nejsou dostačující nebo byste se chtěli dozvědět více, můžete navštívit vzdělávací kurz „[Terapeutické využití Theragunu](#)“. Termíny kurzů sledujte na: [www.rehasport.cz/theragun-kurz](http://www.rehasport.cz/theragun-kurz).



Distributor: REHASPORT TRADE s.r.o.  
[www.rehasport.cz](http://www.rehasport.cz), tel: 800 200 900



Bezdrátový multi-přístrojový nabíjecí stojan pro snadné nabíjení přístrojů Theragun PRO, Theragun Elite a Wave Roller. Bezdrátové nabíjení umožňuje rychlou manipulaci s přístrojem, který může zůstat ve stojanu, i když je plně nabitý. Přístroj není součástí balení.

### Specifikace

Rozměry: 21,7 cm x 4,2 cm

Doba nabíjení:

PRO: 125 minut, Elite: 110 minut, Wave Roller: 110 minut

Váha: 0,795 kg

Kompatibilita: Theragun PRO, Theragun Elite, Wave Roller

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ČI NABITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V TOMTO MANUÁLU, NA NABÍJECÍM STOJANU A NA PŘÍSTROJI.

Snažíme se, aby byly produkty co nejbezpečnější. Jedná se však o moderní mechanické zařízení s elektrickými součástkami. Pokud není nabíjecí stojan, přístroj a jeho součásti používány či udržovány správně, hrozí nebezpečí vzplanutí, elektrického výboje a zranění. Při používání bezdrátového nabíjecího stojanu je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, a to:

- 1. POUŽÍVEJTE PODLE NÁVODU.** Používejte nabíjecí stojan pouze tak, jak je popsáno v návodu. Používejte pouze s doporučeným příslušenstvím. Neprovádějte žádnou údržbu, která není uvedena v tomto provozním manuálu nebo stanovená společností Therabody.
- 2. NEVHODNÉ PRO DĚTI.** Nabíjecí stojan, přístroj ani jeho součástky nejsou určeny pro použití malými dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo osobami nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud není jeho používání pod vedením a dohledem odpovědné osoby, která zajistí bezpečné nabíjení a používání přístroje. Nedovolte, aby byl nabíjecí stojan nebo příslušenství používáno jako hračka. Dbejte zvýšené opatrnosti při použití v přítomnosti dětí. Děti by při manipulaci měly být pod dohledem zodpovědné osoby.
- 3. UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO PORANĚNÍ, NABÍJEJTE POUZE PŘÍSTROJE URČENÉ PRO TENTO NABÍJECÍ STOJAN.** Používejte pouze s AC adaptérem Theragun EA1045SAR. Jiné typy a značky adaptérů mohou způsobit zranění nebo poškození. Nepřipojujte nabíjecí stojan do napájecí zástrčky nebo zapalovače cigaret v autě.

**4. NABÍJECÍ MÍSTO.** Nabíjecí stojan by měl být používán v zastřešeném prostoru a v dobře větraném a suchém prostředí. Nepoužívejte nabíjecí stojan venku, v koupelně či do vzdálenosti 3 m od vany, umyvadla nebo bazénu. Nepoužívejte nabíjecí stojan ani přístroj na mokřem povrchu a nevystavujte je vlhkosti, dešti ani sněhu. Nepoužívejte v přítomnosti výbušných složek (hrozí zvýšené riziko požáru).

**5. NABÍJENÍ.** Nevytahujte nabíjecí stojan ze zásuvky za kabel, snížíte tím riziko poškození elektrické zásuvky a kabelu. Nepřenášejte za kabel. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte nabíjecí stojan, pokud je kabel poškozen. Poškozený nabíjecí stojan okamžitě vyměňte. Neroztahujte kabel a nevystavujte jej tlaku. Umísťujte kabel mimo vyhřívané plochy. Nemanipulujte s nabíjecím stojanem, jeho konektorem, kabelem nebo přístrojem pokud máte vlhké ruce.

**6. ODPOJTE ZE ZÁSUVKY.** Pokud nabíjecí stojan právě nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky. Ujistěte se, že je kabel umístěn tak, aby nebyl vystaven poškození nebo tlaku.

**7. NIKDY NEZAPALUJTE** přístroj, nabíjecí stojan nebo součástky. Při spalování vznikají toxické výpary a plyny.

**8. NENIČTE.** Nepoužívejte nabíječku, přístroj ani nabíjecí stojan, který byl vystaven prudkému nárazu, přejetí vozem, spadl nebo byl jinak poškozen.

**9. USKLADNĚNÍ.** Skladujte na chladném, suchém místě při teplotách 0–40°C. Neskladujte na místech, kde mohou teploty překročit 40°C, jako například na přímém slunečním záření, v autě, v železných budovách a úložných prostorech během léta.

**10. NEROZEBÍREJTE.** Demontáž a nesprávné opětovné sestavení mohou vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru. Záruka je neplatná, pokud byl nabíjecí stojan či přístroj rozmontován nebo z něj byly odstraněny nějaké součástky. Pokud je přístroj nebo nabíjecí stojan poškozen, kontaktujte společnost Rehasport Trade s.r.o.

**11. SERVIS.** Pokud nabíjecí stojan nefunguje správně, pokud došlo k ostrému nárazu nebo pádu, poškození, ponechání v exteriéru nebo pádu do vody, přístroj ani příslušenství nepoužívejte a kontaktujte společnost Rehasport Trade s.r.o. zasláním emailu na info@rehasport.cz ohledně opravy nebo servisu. Nepokoušejte se sami opravit nebo demontovat, riziko elektrického výboje a požáru.

**12. NEPOUŽÍVEJTE PŘI KOUPÁNÍ, VE SPRŠE, VANĚ ČI UMYVADLE.** Nepokládejte a neuskładňujte nabíjecí stojan na místech na dosah vany nebo umyvadla. Nepokládajte do vody, nenechte spadnout do vody či jiné tekutiny. Nesahejte na příslušenství, které přišlo do kontaktu s vodou, okamžitě odpojte zdroj elektrického proudu.

**13. PŘI NABÍJENÍ PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE.**

**14. NEZKOUŠEJTE NABÍJET JINÉ PŘÍSTROJE** než ty, které jsou určeny pro tento nabíjecí stojan.