

## Začínáme

### Krok 1

#### Zapněte a nechte pracovat

Silně stiskněte středové tlačítko a nechte Elite plout po oblastech, které vyžadují nejvyšší pozornost. Rychlost upravíte stisknutím tlačítek **(+)** a **(-)**. Nevývíjejte příliš silný tlak.

### Krok 2

#### Stáhněte si aplikaci Theragun

Provedeme vás bezstarostně nastavením a ukážeme, jak dostat z vašeho Theragunu Elite maximum.


### Krok 3

#### Pocíťte ten rozdíl. Každý den.

Zhluboka se nadechněte a poskytněte si ošetření s přednastaveným programem nebo freestyle, vše je vytvořené přímo pro vás s průvodcem v aplikaci.

## Theragun Elite


- A** OLED displej
- B** Ovládací tlačítka
- C** Multi-úchopová rukojeť
- D** Port k připojení nabíječky
- E** Vyměnitelné nástavce

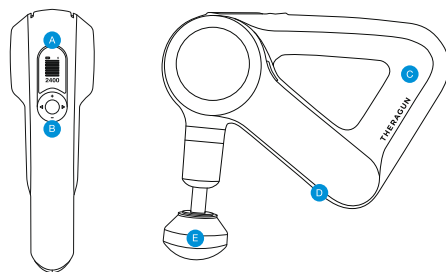

Přečtěte si přiložené bezpečnostní instrukce.


## Použití Theragunu Elite

1. Silným stisknutím středového tlačítka zapnete přístroj Theragun Elite.
2. Pro zvýšení či snížení rychlosti ošetření použijte tlačítka **(+)** a **(-)**. (rozmezí 1750 - 2400 ot./min.).
3. Pro přepínání mezi přednastavenými programy přístroje Theragun Elite použijte tlačítka **(<)** a **(>)**.
4. Přístroj vypnete silným stisknutím a podržením středového tlačítka. Tlačítko držte stlačené dokud se Theragun Elite nevypne.

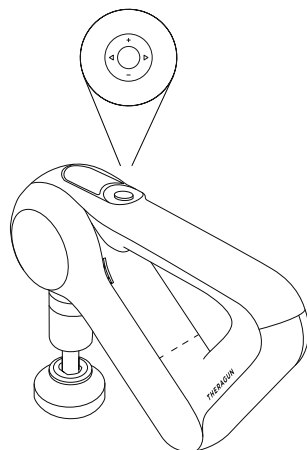

## Nasazení a sundání nástavců

Nasměrujte nástavec k zakončení ramene, otočte nástavec tak, aby tvar koncovky ramene korespondoval s tvarem prohlubně v nástavci. Nasadte zatlačením, díly do sebe zacvaknou. Nástavec sundáte uchopením plastové objímky nástavce a vytáhnutím (viz. obrázek).

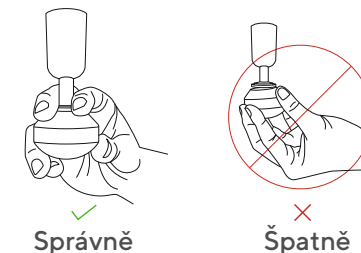


## Nástavce

Váš Theragun Elite přichází s 5 nástavci. Každý je speciálně navržený na jiné svalové skupiny a způsoby použití.



## Nabíjení Theragunu Elite

1. Vypněte přístroj Theragun Elite a připojte nabíječku do portu na spodní straně přístroje.
2. Stav baterie se zobrazí na OLED displeji, kontrolka bliká dokud není baterie dobitá.
3. Nabíjení je dokončeno, když OLED displej zobrazuje 100% a ikona baterie je plná.

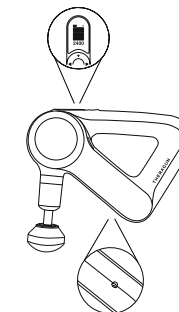


**U přístroje Theragun Elite je možnost bezdrátového nabíjení.**  
Pro více informací o navštivte [www.rehasport.cz](http://www.rehasport.cz)

## Smart vlastnosti

Theragun Elite je smart zařízení, které umožňuje připojení přes Bluetooth. Díky tomu se snadno propojí s aplikací Therabody. Po stažení vás aplikace provede krok za krokem nastavením a ukáže vám, jak spárovat aplikaci s vaším Elite.

Jakmile máte přístroj spárovaný, můžete pomocí telefonu upravit rychlost, aktivovat přednastavené programy ošetření a na základě vašeho používání dostanete doporučení šité na míru. OLED displej je doplněk aplikace a pomocník při průvodcovaném ošetření. Zobrazuje aktuální rychlost a sílu.

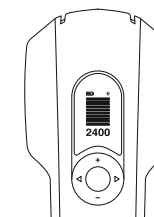

Naskenujte QR kód a začněte.